

ODEŚLANIE ZESTAWU:

80 dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest **ważny 80 dni roboczych** od daty wystawienia.



Wysyłka kurierem DHL

przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejając etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>

Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”



Wysyłka powinna nastąpić **w dniach poniedziałek - czwartek**. Nie powinna być nadawana przed dniami wolnymi od pracy. Nadanie przesyłki powinno nastąpić **najpóźniej 2 dni od pobrania**.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z informacją medyczną:

799 399 361

e-mail: informacja.krakow@diagnostyka.pl

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA oraz DATĘ URODZENIA

DIAGpack

BADANIA LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

NAZWA
BADANIA:

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anti-S w klasie IgG, ilościowo (DBS) test do samodzielnego pobrania

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego w zaciszu domowym.

Próbka krwi m poddanej dostarczonej bibule zostanie w warunkach laboratoryjnych poddana odpowiednim procedurom i oznaczeniu stężenia przeciwciał przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2. **Obecność tych przeciwciał wskazuje na kontakt z wirusem lub szczepienie przeciw COVID-19.**

Skład zestawu:

- ✓ karta do pobrania krwi włośniczkowej
- ✓ 2 sterylne nakłuwacze
- ✓ jałowy gazik
- ✓ 2 waciki nasączone alkoholem
- ✓ plastikowy woreczek strunowy z pochłaniaczem wilgoci
- ✓ zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa
- ✓ Oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych oraz instrukcja postępowania



www.diagnostyka.pl



DIAGNOSTYKA
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Badanie pobierane może być wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
- Przechowywać zestaw w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- W przypadku problemów ze wzrokiem lub pobraniem krwi, pobranie należy wykonać w obecności innej osoby dorosłej.

Przed użyciem zestawu skonsultuj się z lekarzem jeśli masz skłonności do krwawień lub występowania zaburzeń krzepnięcia lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe.

ZASADY DOTYCZĄCE ZESTAWU:

- Zestaw do pobierania krwi jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku, dla jednej osoby
- Nie należy dotykać karty do pobrania krwi w miejscach zaznaczonych okręgów.
- Nie należy przerywać raz rozpoczętego zabiegu pobierania krwi; nie należy dodawać świeżej krwi do wyschniętych kropli krwi na karcie.
- Nakłuwacze należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Każdy nakłuwacz może być użyty tylko raz. Nie należy używać nakłuwaczy dostarczonych bez osłony lub z luźną osłoną.
- Zestaw należy przechowywać w zakresie temperatur od 8°C do 30°C
- Po pobraniu krwi wszystkie zużyte elementy zestawu należy wyrzucić do odpadów komunalnych zmieszanych.

PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
- Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, **nie używaj zestawu** skontaktuj się pisząc na adres mailowy: **diagpack@diag.pl**
- Wpisz dane osobowe pacjenta, u którego jest wykonywane badanie na dołączonym oświadczeniu i po zapoznaniu się z informacjami, pacjent badany musi **koniecznie podpisać oświadczenie** w dolnym prawym rogu.

INSTRUKCJA POBRANIA POBRANIA:

1. **Umyj ręce** ciepłą wodą z mydłem, poświęcając tej czynności co najmniej 30 sekund.

2. **Wybierz jeden z palców** środkowych lub serdecznych do pobrania krwi. Spróbuj pobudzić krążenie krwi, np. wykonując krążenie ramion lub ogrzewając dłoń w ciepłej wodzie.


3. **Otwórz kartę do pobrania krwi** w taki sposób, aby wszystkie 5 pól było widocznych.

4. **Zdezynfekuj cały opuszek palca** za pomocą załączonych wacików nasączonych alkoholem. Odczekaj, aż palec wyschnie (co najmniej 15 s.). Nie dotykaj* niczego palcem po dezynfekcji, aby uniknąć zanieczyszczenia.

5. **Otwórz jeden z nakłuwaczy**, przekręć zieloną końcówkę (nie wyszarpuj) i ściągnij.



6. Przyłóż nakłuwacz do opuszka palca naciskając przycisk mocno **dociśnij**, aż do poczucia nakłucia.

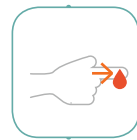

7. **Masuj palec** od podstawy w kierunku miejsca nakłucia tak, aby powstała duża kropla krwi.



8. Trzymaj palec nad kartą do pobrania krwi. **Pozwól, aby kropla krwi bezdotykowo opadła na jedno z zaznaczonych pól.** Powtórz tę samą czynność dla pozostałych pól.

UWAGA! Jeśli kropla krwi nie spłynie samoczynnie, należy ostrożnie dosunąć kartę tak, aby powstał kontakt z kroplą krwi bez dotykania karty palcem.




9. **Dokładnie wypełnij krwią 5 okręgów** (co najmniej w dwóch trzecich) w obrębie oznaczeń.

UWAGA! W razie potrzeby użyj drugiego nakłuwacza i powtórz w/w kroki na innym palcu.




10. Po pobraniu próbki krwi **dociśnij jałowy gazik do miejsca nakłucia**, aby zatrzymać krwawienie.

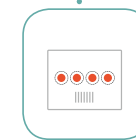

11. Umieść otwartą kartę do pobrania krwi w suchym miejscu, zabezpieczonym przed światłem słonecznym. **Pozostaw kartę na 3 do 4 godzin do wyschnięcia** w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Nie umieszczaj karty na grzejniku ani żadnym innym źródle ciepła! Kartę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie należy jej zginać.

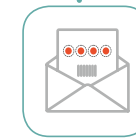

12. Po wyschnięciu **zamknij kartę, umieść w torebce strunowej z pochłaniaczem wilgoci** i szczelnie zamknij. Całość włóż do pudełka po zestawie do pobrania krwi.



13. **Pamiętaj**, że do pudełka musi zostać **dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania oraz e-voucher** otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.



Wyślij pudełko jak najszybciej! Max. do 2 dni po pobraniu.



Na naszym kanale youtube znajdziesz film instruktażowy z wykonania pobrania.